

דף מידע טכני

מעבדות ביולוגיות - מחטים וכלים חדים


אל תעשו

- אל תעבירו מחטים ממקום למקום, ככל שהדבר ניתן. השליכו מחטים משומשות לתוך מיכלי האיסוף והפינוי באתר השימוש.



- אל תשליכו מחטים וכלים חדים לפחי האשפה הרגילים. הימצאותם שם יוצרת סיכון חמור לשלוםם ובריאותם של אנשי צוותי הניקיון.
- על מיכלי האיסוף יופיעו סימני אזהרה מפני סיכון ביולוגי.

- אל תחליפו בידיכם מכסים או נרתיקים של מחטים משומשות.
- אל תכופפו ואל תשברו מחטים בידיכם.
- אל תשתמשו בהתקני חיתוך למחטים מכיוון שפעולת החיתוך עלולה לגרום להתזה.
- אל תסירו מחטים ממזרקים חד-פעמיים.

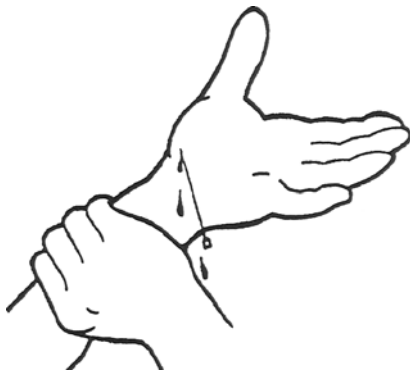

השליכו מחטים וכלים חדים בצורה בטוחה למיכלים המיועדים לכך.

מחטים וכלים חדים עלולים לגרום, באקראי, לדקירות ולחתכים. נוזלים הניתזים מתוך מחטים, במהלך טיפול לא נאות בהן, עלולים לגרום להתפשטות של זלקות בעקבות פציעה.

מחטים המכילות דם מזוהם וכלים חדים מזוהמים עשויים לגרום להתפשטות וירוסים כמו אלה הגורמים לצהבת B ולאיידיס.

היזהרו מאוד במהלך שימוש וטיפול במחטים ובכלים חדים, במיוחד אם הם באו במגע עם דם.

סלקו מחטים וכלים חדים לאחר השימוש בהתאם לנהלים המקובלים.

עשו:

- בכל מקרה שבו ניתן - השתמשו בצינוריות עם קצה התזה ללא קצוות חדים, ולא במחטים.
- דווחו על כל פציעה שנגרמה ממחט.
- סלקו מחטים וכלים חדים מיד לאחר השימוש.
- השליכו את המחטים והכלים החדים, לאחר השימוש, ישירות לתוך מיכלים קשיחים עמידים בפני ניקוב, בעלי פתח רחב, המסומנים בצורה ברורה בסימן אזהרה להתראה על סיכון ביולוגי.



סימון אזהרה לסיכון ביולוגי

- השתמשו אך ורק במחטים הננעלות על המזרקים (מסוג luer-lok).
- הציבו מיכלים ייעודיים לפינוי במקומות שבהם משתמשים במחטים.
- איטמו את המיכלים לאחר שהתמלאו, סמנו כל מיכל בצורה ברורה, ופנו אותם מהמקום בהתאם לדרישות התקנות לפינוי פסולת מסוכנת.
- ודאו התאמת הציוד שבשימוש לת"י 1268 (מזרקים ומחטים) ו-4501 (מיכלי איסוף).